


PRO!DEA

プロイデア
首ストレッチマッサージャー M1

取扱説明書

一般家庭用 添付文書 保証書付
家庭用電気マッサージ器

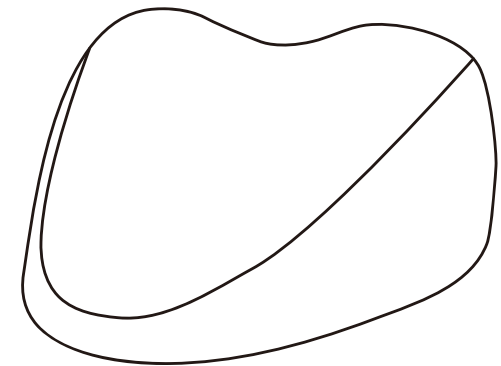

PRO!DEA
プロイデア

【発売元】株式会社ドリーム
名古屋市東区徳川町403番地1-C・Cクオリアビル
【お客様相談室】0120-559-553
proidea.pro 「プロイデア」は株式会社ドリームの登録商標です。
0070-2860 N0206-2

取扱説明書

添付文書

保証書付

保管用

このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にご使用ください。

この取扱説明書は必ず保管し、必要なときにお読みください。

本商品は一般家庭用です。

業務用などにご使用にならないでください。

もくじ

安全上のご注意	2
使用目的、効能・効果	5
梱包内容	5
各部の名称	5
使い方	6
お手入れと保管	7
こんなときは	7
仕様	8
保証規定/品質保証書	9

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

〈仕様〉



注意

●医師からマッサージを禁じられている人は使用しないでください。●次の場合はご使用しないでください。●睡眠薬等を服用した人及びめいめい(酩酊)状態の人はご使用しないでください。●顔面に傷や湿疹、はれものなどがある場合 ●顔面に皮膚炎、過度の日焼けなど、皮膚に異常がある場合 ●次のような医用電気機器との併用は、絶対しないでください。これら医用電気機器の誤動作をまねき、生命に著しい障害をもたらす原因になります。●人工心肺などの生命維持用電気機器・心電計などの装着型医用電気機器 ●幼児や小さいお子様に使用させたり、本体で遊ばせたり、上に乗せたりしないでください。事故やけがの原因になります。自分で意思表示のできない人や身体の不自由な人には、一人で使用させないでください。けがや体調不良の原因になります。●疲労が激しいとき・酒に酔っているとき・湿疹が生じているときは体調不良をおこすおそれがあります。●食前、食後の1時間は使用しない。体調不良をおこすおそれがあります。●寝る直前や貧血気味の人は使用しないでください。●電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。また、重いものを載せたり、挟み込んだりしないでください。電源コードが破損し、感電、ショート、火災の原因になります。●電源は必ず交流用100V専用コンセントを使用してください。(海外や変圧器を用いた使用は、おやめください。)火災やけがの原因になります。●電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは、使用しないでください。感電・ショート・火災・故障の原因になります。●ACアダプタは、専用品以外は使用しないでください。火災・感電の原因になります。●マッサージ以外の用途に使用しないでください。事故やけが、体調不良の原因になります。首部、頭部、顔周辺にアクセサリーなど硬いものをつけて使用しないでください。事故やけがの原因になります。●顔、頰、のど、腹部、胸部、ひじ、ひざなどの骨部には使用しないでください。事故や体調不良の原因になります。●首周辺をマッサージするときは、もみ玉の動きに注意してください。また首の前方はマッサージしないでください。事故やけがの原因になります。●他の治療器と同時に使用しないでください。



禁止



分解禁止

●分解や修理、改造をしないでください。●発火したり、故障や事故の原因になります。



ぬれ手禁止

●濡れた手で専用ACアダプタのプラグの抜き差しやスイッチの操作をしないでください。感電の原因になります。



警告



必ず守る

●使用しても効果が現れない場合は、医師または専門家に相談してください。●故障を発見したときは、すぐに使用を中止し電源を切ってください。事故やけがの原因になります。●専用ACアダプタのプラグのほこりはよくふき取ってください。感電やショート、発火の原因になります。●コード類(専用ACアダプタのプラグ、ジャック等)を取り外すときは、コードを持って引き抜くなどしてコードの接続部に無理な力をかけないでください。コードの断線やショートにより、火災や感電の原因になります。●専用ACアダプタのプラグは、しっかりコンセントの根元まで差し込んでください。感電やショート、発火の原因になります。



必ず守る

●使用時以外は、専用ACアダプタをコンセントから抜いてください。絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。●お手入れの際は、本体を停止させ必ず専用ACアダプタをコンセントから抜いてください。感電やけがの原因になります。●停電したときは、ただちに専用ACアダプタをコンセントから抜いてください。



禁止

●定められた1回の使用時間は5分以内にしてください。マッサージは1日5分以上しないでください。●定められた使用時間を超えて使用しないでください。筋肉や神経に対して必要以上の刺激となり、逆効果となったり、けがの原因になります。●<もみ玉> 本商品を下にして使用しないでください。故障や事故の原因になります。本体を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。故障や事故の原因になります。 枕として使用しないでください。事故やけがの原因になります。●<もみ玉部分> 本体に勢いよく乗ったり、立ったり、座ったりしないでください。事故やけがの原因になります。●皮膚に直接マッサージをしないでください。●身体が濡れた状態で本商品を使用しないでください。感電の原因になります。●周囲に障害物のない、床面が水平な場所に設置してください。事故やけがのおそれがあります。●背もたれ部分を下にして使用しないでください。故障の原因になります。●生地を無理に引っ張ったり、刃物やとがったもので突き刺したりしないでください。けがや故障の原因になります。●本商品を移動するときは、引きずらないようにしてください。床や畳を傷つけるおそれがあります。

種別	機械器具 77 バイブレーター
医療機器分類	管理医療機器
一般名称	家庭用電気マッサージ器(JMDN コード 34662000)
販売名	プロイデア 首ストレッチマッサージャーM1
医療機器認証番号	229AGBZX00052000
使用目的/効能効果	あんま・マッサージの代用。一般家庭で使用する。 ●疲労の回復 ●血行の促進 ●筋肉の疲れをとる ●筋肉のこりをほぐす ●神経痛・筋肉痛の痛みをやわらげる
定格電源 (Rated voltage)	AC 100V 50/60Hz
定格消費電力	12W (ヒーター部 4.8W含む)
専用ACアダプタ定格	入力 AC 100-240V 50/60Hz 40VA 出力 DC 12V=1.5A
タイマー	5分自動オフ
商品サイズ	(約) W290×L255×H150 (mm)
商品重量	本体(約)1.42kg
素材	本体：ウレタンフォーム 本体カバー：綿
ヒーターの最高温度	50℃以下
生産国	中国
製造業者	U Young Appliance Manufacturing (Xiamen) Co., Ltd.
製造販売元	株式会社ドリーム 〒461-0023 名古屋市中区徳川町403番地1・C・Cクオリアビル


2017年7月28日(第1版)

〈使用目的、効能・効果〉


あんま・マッサージの代用。一般家庭で使用する。
疲労の回復、血行の促進、筋肉の疲れをとる、筋肉のこりをほぐす
神経痛・筋肉痛の痛みをやわらげる

〈梱包内容〉


本体

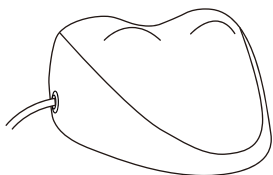


専用 A C アダプタ

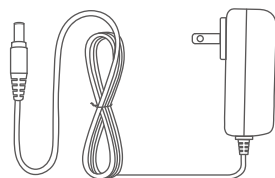


〈各部の名称〉

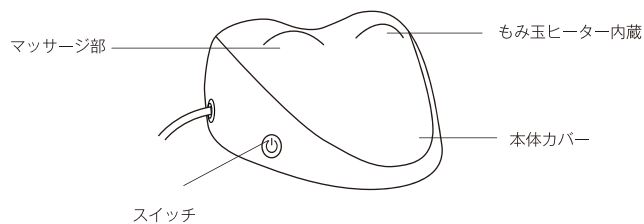

専用 A C アダプタ

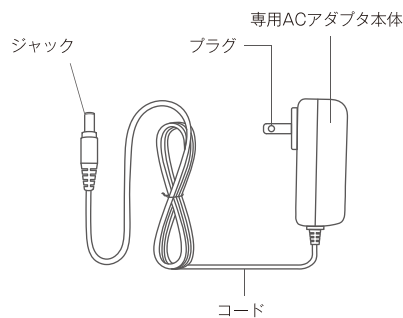

(スイッチの詳細)

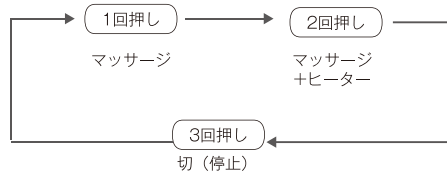


〈使い方〉

1. 本体の電源コネクタに専用 A C アダプタのジャックを差し込みます。まっすぐ根元まで確実に差し込んでください。




2. 専用 A C アダプタのプラグをコンセントに差し込みます。専用 A C アダプタの本体を持って、奥までしっかり差し込んでください。

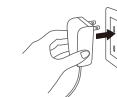

3. スイッチを押して動作を開始します。もみ玉が作動し運転を開始します。スイッチを押すたびに、本商品の動作が下記のように変わります。



4. 本体を床に置いて、首と肩を本体のもみ玉に対し右図のようにしてマッサージ部をあてます。もみ強さが強過ぎると感じられるときは、タオルなどを挟んでご使用ください。

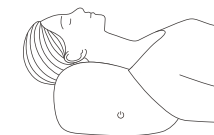

5. 動作を停止する場合はスイッチを「切」になるまで押して動作を停止します。電源が切れもみ玉が停止します。スイッチを押さない場合、約 5 分経過するとタイマー機能がはたらき、自動で運転を停止します。

6. 使用後専用 A C アダプタのプラグをコンセントから抜いてください。

〈お手入れと保管〉

本体のお手入れ

- 本体の汚れは、乾いたやわらかい布でふき取ってください。
- 汚れがひどいときは、ぬるま湯で薄めた中性洗剤をしみ込ませたやわらかい布をよく絞ってからふき取ってください。
- 変色などを防ぐため、汚れを落とすときにシンナーやベンジンなどを使用しないでください。

保管について

- 乳幼児やこどもの手の届く場所には保管しないでください。
- 汚れやほこりをよく拭き取り、湿度の低いところに保管してください。
- 長時間ご使用にならないときは、汚れやほこりが付着しないようにカバーなどをかけて保管してください。
- ご不要となった本体や付属品の廃棄方法は、お住まいの各都道府県や市町村の指示に従ってください。

〈こんなときは〉

修理に出す前にもう一度点検してください。

それでも正常に動作しないときは、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

絶対に分解したり、修理改造はしないでください。

異常動作をしてけがや事故のおそれがあります。

こんなときは？	調べるところ	処置のしかた
動かない	専用ACアダプタが抜けていませんか？	専用ACアダプタをコンセントにしっかり差し込んでもう一度操作してください。
突然使用中に停止した	大きな負荷がかかっていたり、長時間の連続使用をしていませんか？	もみ玉を強く押し付けすぎたり、長時間の連続使用により内部の温度が上昇した場合、保護装置が作動し停止します。この場合、専用ACアダプタのプラグを抜いて、1時間程度放置して内部の温度を下けた後、ご使用ください。
	スイッチを入れてから約5分経過していませんか？	スイッチを入れてから約5分経過するとタイマー機能がはたらき、自動的に停止します。故障ではありませんので、この場合はスイッチを入れなおしてください。
もみ玉のヒーターが温かくなかない		お使いになる環境や使用時間によっては、ヒーターが最高温度に達しないことがあります。
動作音が大きい		本商品の構造上、ある程度の動作音が発生します。

〈使用中の注意事項〉

⚠ 警告



必ず守る

- もみ玉部分が明らかにおかしい動きをしている、ヒーターが止まらない、その他スイッチが効かないと思った場合は、直ちに使用をやめてください。●機器が故障した場合は、勝手に修理などをせず、販売店又は製造販売元に連絡してください。事故やけがの原因になります。●身体に異常を感じたときや気分が悪く感じた時は、すぐに使用を中止してください。使用中、故意に強くあてるなど無理な力をかけないでください。けがや体調不良の原因になります。●機器のもみ玉は表面が熱をもつため、温度感覚喪失の認められる人はご注意ください。低温やけどの原因になります。



禁止

- 本体をストーブなどの熱いものの近くや、電気毛布、コタツ、ふとんの中に入れて使用しないでください。事故・感電・低温やけどや火災の原因になります。

⚠ 注意



必ず守る

- 正しい姿勢・方向でご使用ください。逆に使用したり、横からのせて使用したりしないでください。●スイッチを入れて正常に動作することを確認してからご使用ください。身体をあてて急に動かすと、けがの原因になります。
- 使用中は眠らないでください。身体への異常やけがの原因になります。



禁止

- テレビの近くで使用しないでください。画面が変色したり、電波状況により若干テレビの画面がちらつくことがあります。●本商品の近くで携帯電話を使用しないでください。●他の電気製品に近づけて使用しないでください。

〈使用後及び保管時の注意事項〉

⚠ 警告



必ず守る

- 操作つまみ、ダイヤル、スイッチなどを元の位置に戻した後、電源を切ってください。●機器本体、付属品などは、次回の使用に支障のないように洗浄し、湿気の少ないところに整理・保管してください。●機器を衛生的に保つための、清掃、予防点検及び保守に関する方法、予防点検及び保守をおこなわなければならない部分はその実施周期を含めます。●乳幼児や小さいお子様の手の届く場所には保管しないでください。

⚠ 注意



必ず守る

- 長期間ご使用にならないときは、汚れやほこりが付着しないようにカバーをかけて保管してください。



禁止

- 汚れやほこりをよくふき取り、湿度の低いところに保管してください。次のような場所で使用したり、保管しないでください。●直射日光が当たる場所、高温多湿の場所、水のかかる場所、ほこりの多い場所、火気の近く、振動衝撃の加わりやすい場所、強電磁界下●変色などを防ぐため、汚れを落とすときにシンナーやベンジンなどを使用しないでください。●汚れがひどいときは、ぬるま湯で薄めた中性洗剤をしみ込ませたやわらかい布を絞ってからふき取ってください。●本体の汚れは、乾いたやわらかい布でふき取ってください。

〈保証規定〉

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意事項に従った正常な使用状態で、お買い上げ一年以内に故障した場合には無償修理、または交換いたします。
- 2.無償保証期間以内に故障して修理を受ける場合は、株式会社ドリームお客様相談室にご連絡ください。
- 3.無償保証期間以内でも次の場合には、有償修理になります。

- (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
 (ロ) お買い上げ後の落下などによる故障および損傷
 (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や電源の異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障および損傷
 (ニ) 品質保証書の提示がない場合
 (ホ) 品質保証書にお買い上げの年月日、お客様名、販売店名のない場合、あるいは文句を書き替えられた場合
 (ヘ) 消耗部品
 (ト) 故障の原因が本商品以外に起因する場合
 (チ) その他取扱説明書に記載されていない使用方法による故障および損傷

- 4.品質保証書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。
- 5.品質保証書は本規定に明示した期間、条件のもとにおいて無償保証をお約束するものです。この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 6.保証部品は製造打ち切り後、最低3年間保有しています。


〈安全上のご注意〉


お使いになる前に必ずお読みください。

ここに示した内容は、本商品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や、他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するための重要なものです。

次の表示・図記号の内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項を必ずお守りください。

●警告、注意について表示の説明

 **警告** 「死亡または重傷を負うことが想定される」内容を示します。

 **注意** 「傷を負う、または物的損害が発生することが想定される」内容を示します。

●図記号の説明

  強制(必ずお守りいただく)内容を示します。     禁止(してはいけない)内容を示します。

※1「重症」とは、失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、または治療に入院や長期の通院を要するものを指します。
 ※2「傷害」とは治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。
 ※3「物的損傷」とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を指します。
 ※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

〈使用前の注意事項〉



警告

- 次のような人は医師とご相談の上ご使用ください。事故や体調不良をおこすおそれがあります。
- ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医療用電気機器を使用している人●悪性しゅよう(腫瘍)のある人●温度感覚喪失が認められる人●心臓に障害のある人●生理中の人や妊娠初期の不安定期または出産直後の人●背骨に異常のある人または背中が左右に曲がっている人●糖尿病などによる高度な抹しょう(梢)循環障害からくる知覚障害のある人●皮膚に創傷のある人●安静を必要としている人や体調がすぐれない人●骨粗しょう症の人、せきつい骨折、ねんざ、肉離れなど、急性[どう(疼)痛性]疾患の人●体温38℃以上(有熱期)の人 例:急性炎症症状[けん(倦)怠期、悪寒、血圧変動など]の強い時期、衰弱しているとき●その他、医療機関で治療中の入
- ご使用前に布破れがないか確認し、どんな小さな破れでも見つけた場合はご使用しないでください。髪の毛や衣類などが巻き込まれ事故やけがの原因になります。●本体カバーをつけた状態でご使用ください。●アース端子を持つ機器はアースを正しく接続してください。すべてのコードは安易に離脱しないように、正しく確実に接続してください。●初めてご使用いただくときや、長時間ご使用しなかった機器をご使用いただくときは、取扱説明書とおりの操作をおこない、安全かつ正常に作動することをご確認ください。



必ず守る



水場禁止

- 本体に水をかけたり、浴室など湿気の多い場所や屋外で使用したり放置をしないでください。

品質保証書	
ドリーム商品をお買い求めいただきましてありがとうございます。本商品は、厳重な検査を行い高品質を確保しております。万が一、不具合が発生しました場合は保証規定によりお買い上げ一年間は無償修理または交換いたします。	
商品名	お買い上げ店名
お名前	ご住所 〒
ご住所 〒	TEL: ()
TEL: ()	お買い上げ年月日